



Masques de protection simplifiés pour gouttelettes d'eau


Dossier IFTH 16 Mars 2020

Proposition 1 FORME MASQUE (type bec de canard)



Proposition 1 FORME MASQUE (type bec de canard avec bandes élastique)

Besoins textile et fournitures

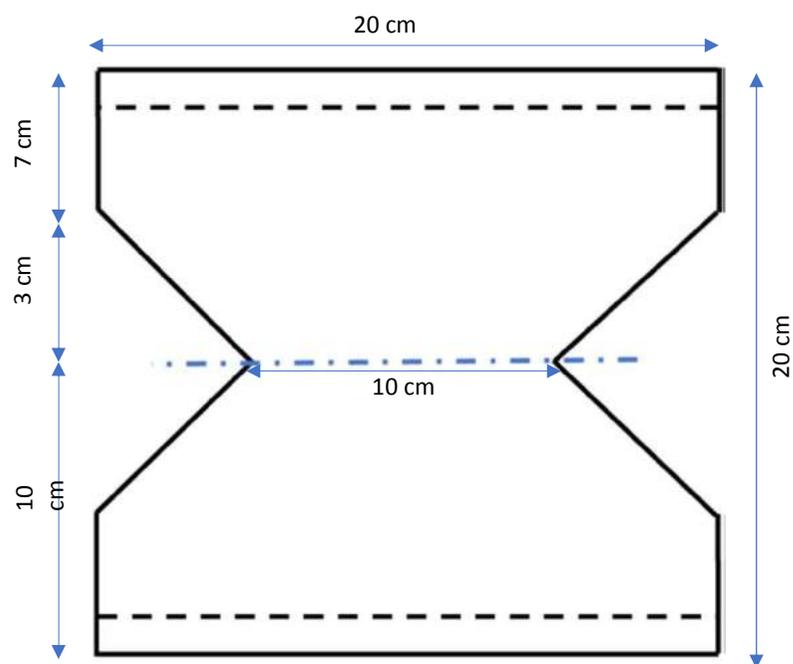

Pour fixer le masque

2 élastiques souples



Ou bande textile




Assemblage ultra-son (système à la continue de type molette)
Ou par couture

Proposition 2 FORME MASQUE chirurgical



Proposition 2 FORME MASQUE (type FFP2 par pliage)


Besoins textile et fournitures

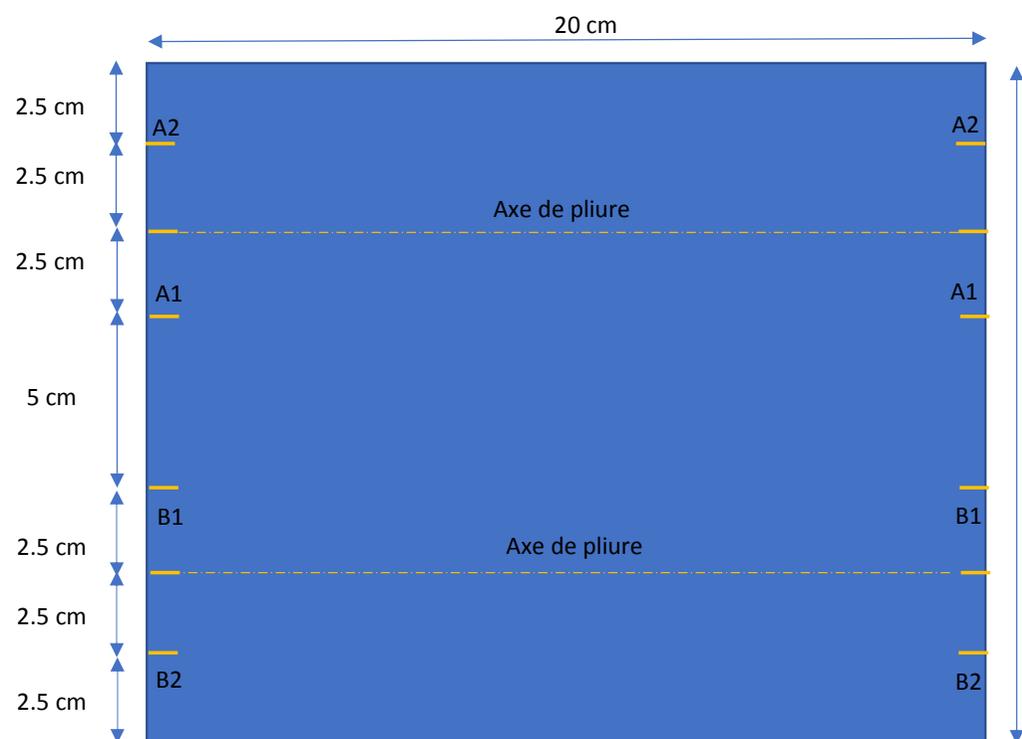

Proposition 1 FORME MASQUE chirurgical

Gamme de fabrication




- Superposer les 2/3 épaisseurs du masque
- Glacer tout le tour à 1 cm des bords
- Border le haut et le bas du masque en repliant la bande de 3cm en 2
- Piquer plis en pliant A1 sur A2 puis B1 sur B2 pour le premier bord
- Piquer plis en pliant A1 sur A2 puis B1 sur B2 pour le deuxième bord
- Glacer élastique sur bord droit (élastique vers l'intérieur)
- Glacer élastique sur bord Gauche (élastique vers l'intérieur)
- Border les bords du masque en repliant la bande de 3cm en 2
- Couper à ras des assemblages

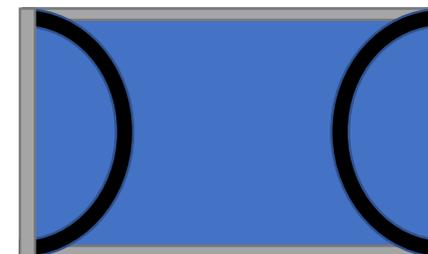

Proposition 2 FORME MASQUE chirurgical



Proposition 2 FORME MASQUE chirurgical

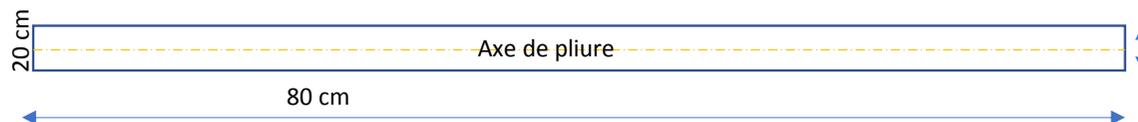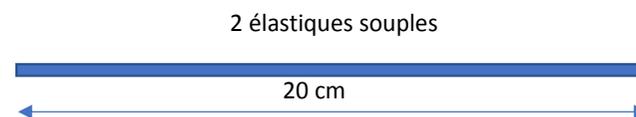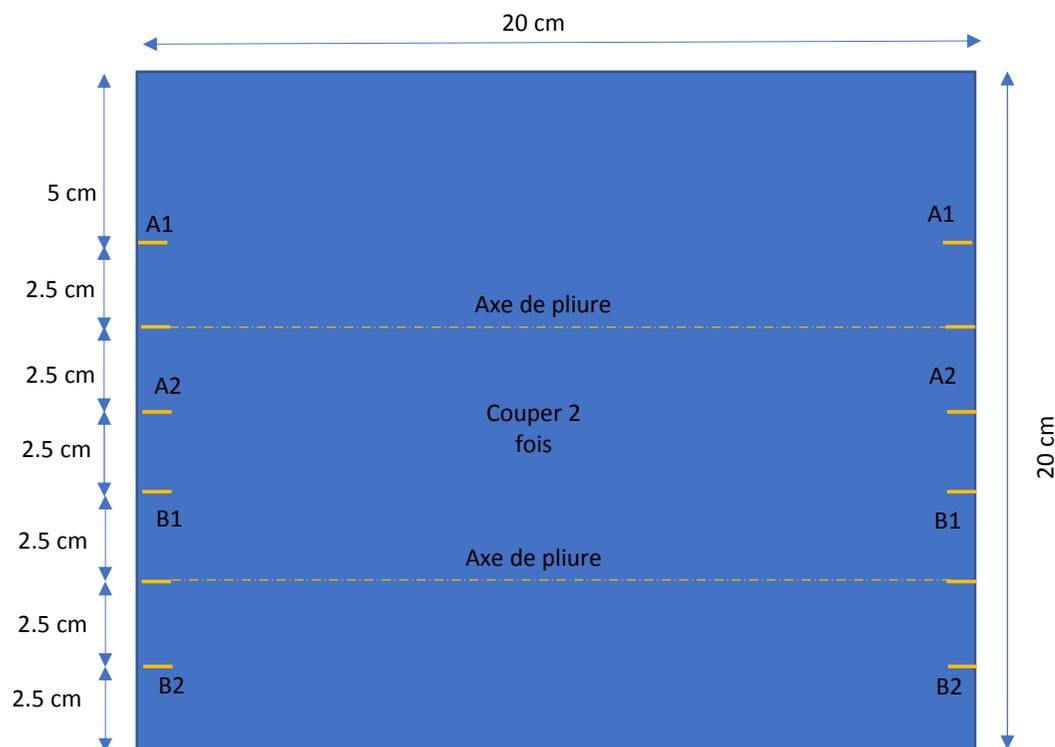

Proposition 1 FORME MASQUE (type FFP2 avec bandes élastique)

Gamme de fabrication

- Super poser les 2/3 épaisseurs du masque
- Glacer tout le tour à 1 cm des bords
- Border le haut et le bas du masque en repliant la bande de 3cm en 2
- Piquer plis en pliant A1 sur A2 puis B1 sur B2 pour le premier bord
- Piquer plis en pliant A1 sur A2 puis B1 sur B2 pour le deuxième bord
- Glacer élastique sur bord droit (élastique vers l'intérieur)
- Glacer élastique sur bord Gauche (élastique vers l'intérieur)
- Border les bords du masque en repliant la bande de 3cm en 2
- Couper à ras des assemblages

